



**BRUKSANVISNING**

# Duschstol Vastus

**En stark och funktionell duschstol utvecklad särskilt till den bariatriska användaren.**

Duschstol Vastus är anpassad till användare upp till 325 kg.



**UPP TILL 325 KG**



# Innehållsförteckning


1. Säkerhet .....	3
2. Symbolförklaring.....	4
3. Generellt .....	5
4. Användning.....	5
5. Inställningar .....	5
6. Långtidsförvaring .....	6
7. Rengöring och underhåll .....	6
8. Bortskaffning .....	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer .....	8
11. Beställning .....	8

# 1. Säkerhet

---

## **VARNING**

Duschstol Vastus får inte användas utan instruktion av utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i användandet av duschstolen. Vid felaktig användning kan användaren ta skada.

Bruksanvisningen ska läsas grundligt innan duschstolen används. Rikta speciellt din uppmärksamhet mot säkerhetsvägledningar markerade med .

Cobi Rehab påtager sig inget ansvar för eventuella skador på produkten eller för personskador förorsakade av felaktig användning av Duschstol Vastus.

Kontakta Cobi Rehab omedelbart om Duschstol Vastus är skadad eller har felaktigheter. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för oförutsedda situation som kan uppstå efter reparationer som gjorts utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.

## **SÄKERHETSVÄGLEDNING**

Duschstol Vastus ska ställas in av utbildad personal eller av personer som fått instruktion i användandet av duschstolen. Felaktig inställning kan skada användaren.

Duschstol Vastus kan tippa eller ta skada om den används av personer som väger mer än 325kg.

Duschstol Vastus får inte användas i bassänger eller swimmingpools.

Använd Duschstol Vastus på ett plant och hårt underlag med en maximal lutning på 3°. Vi större lutning än 3° finns risk för att duschstolen välter.










Duschstol Vastus ska monteras på ett korrekt sätt innan den används. Se instruktion under **Inställningar**.


Desinficera alltid duschstolen innan den ska användas av en annan användare. Detta för att undvika korskontaminering.

Bristande kontroll av bultar såsom anvisas kan förorsaka funktionsfel.

Brist på underhåll kan skada duschstolen, förkorta livslängden eller påverka duschstolens prestanda.

## 2. Symbolförklaring

Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett.	
	Varning!
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet för medicintekniska produkter EU 2017/745
	Cobi artikelnummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Tillverkare
	Medicinsk utrustning klass 1
	Användarvikt
	Läs manual
CE-etiketten är placerad på duschstolens ram. Exempel på etikett kan ses här under.	

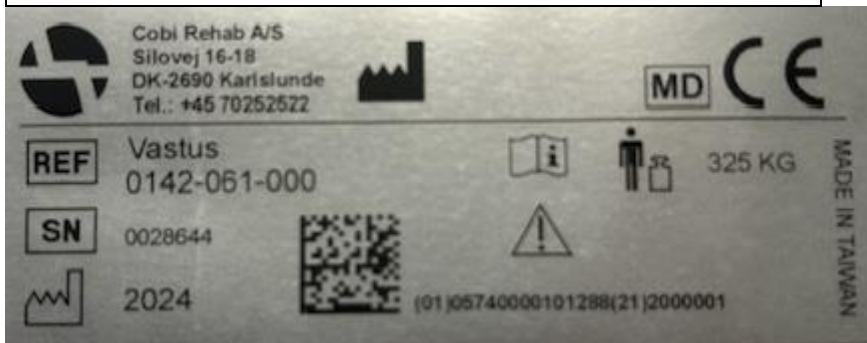

## 3. Generellt

---

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om användningen av duschstol Vastus för anpassad målgrupp. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning finner du på vår hemsida. Kontrollera att den version du sitter med nu är den senaste.

Om du har behov av en bruksanvisning med större skrift finns bruksanvisningen i PDF-format på [www.cobirehab.se](https://www.cobirehab.se). Där kan du förstora upp skriftstorleken.

Du kan alltid kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar fler upplysningar om duschstolen.

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varning.


Duschstolens UDI-nummer framgår av etiketten på duschstolen.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkten kan ses på hemsidan under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

## 4. Användning


---

Duschstol Vastus används vid toalettbesök och vid duschsituationer i våtrumsmiljö (till exempel duschrum).

 Duschstol Vastus kan tippa eller ta skada om den används av personer som väger mer än 325 kg.

Duschstol Vastus används på sjukhus, omsorgsboenden och i privata hem.

Rådfråga alltid en förskrivare innan Duschstol Vastus rekommenderas till en användare.

 Duschstolen får inte användas i miljöer med hög salthalt (simbassäng eller simhall) eller i starkt sura eller basiska miljöer.

### Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer förknippade med bruket av Duschstol Vastus.

## 5. Inställningar

---

### Montering av Duschstol Vastus

Vastus består av två delar, stolens ram och ryggstöd.

1. Sätt en bricka på varje bult. Fäst ryggstödet på stolens ram genom att sätta i de fyra bultarna och brickorna i hålen, två på vardera sida. Dra åt dem ordentligt med den medföljande insexnyckeln.

### Justering av sittedjupet och ryggstödet

1. Sittedjupet kan justeras i tre positioner. Välj två hål (fram, mitt eller bak) på ryggstödet för önskat sittedjup. Se instruktion ovan.

### Justering av benens höjd

1. Höjden på benen kan justeras i sex positioner genom att låsa upp bulten, justera höjden på benen och sedan dra åt de fyra bultarna som redan är monterade på benen. Använd båda insexnycklarna när du justerar.

### Verktyg att använda

Två insexnycklar med 5 mm sexkant, fyra skruvar med invändig sexkant och fyra brickor.

### Under användning

Ryggstödet kan justeras i tre olika djup. Att justera sittedjupet påverkar inte stolens stabilitet.

## 6. Långtidsförvaring


---

Duschstol Vastus bör förvaras mörkt och i en temperatur mellan -10° - 50° C.

## 7. Rengöring och underhåll

---

Duschstolens ram, sits och armstöd ska efter användning tvättas med kalk- och saltneutralt vatten med ett vanligt rengöringsmedel och sedan torkas av.

 Duschstolen får inte användas i miljöer med hög salthalt (simbassäng eller simhall) eller i starkt sura eller basiska miljöer.

### Desinficering


Duschstol Vastus kan också desinficeras med ytdesinfektion 70% eller ned en klorprodukt 1000-1200 ppm.

 Desinficera alltid Duschstol Vastus innan den ska användas av en ny användare. Detta för att undvika korskontaminering.

Eventuella lokala rutiner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

### Bultar

Bultar ska kontrolleras regelbundet och bytas ut om det är nödvändigt.

 Bristande kontroll av bultar kan förorsaka fel på produkten.

## 8. Bortskaffning

---

När duschstolen inte längre används ska den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information kring bortskaffning.

## 9. Garanti

---

Cobi Rehab garanterar att Duschstol Vastus är felfri när den levereras. Skulle det mot förmodan vara brister eller fel på duschstolen vid leverans, kontakta Cobi Rehab omedelbart.

Garantiperioden för Duschstol Vastus är ett år från köpedatum och täcker produktionsfel eller defekt vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller inte:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller skadats väsentligt.
- produkter som har reparerats av ej auktoriserad person.

Garantin omfattar inte:

- slitagedelar.

### 9.1 Oförutsedda händelser

Varje oförutsedd händelse som inträffar vid bruk av Duschstol Vastus ska rapporteras till Cobi Rehab.

### 9.2 Efter förväntad livslängd

Efter förväntad livslängd är det viktigt att det görs en bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet av produkten, då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten är använd eller hur sliten den är.

Garantin gäller inte om Cobi Rehab bedömer att duschstolen har hanterats på ett olämpligt sätt eller använts i salthaltiga, sura eller basiska miljöer.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både service och reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av någon art.

⚠ Brist på underhåll kan skada duschstolen, förkorta livslängden eller påverka duschstolens prestanda.

## 10. Specifikationer

Maximal användarvikt	325 kg
Sittbredd	61/71 cm
Sittdjup, justerbar	40-52 cm
Sitthöjd, justerbar	44-59 cm
Avstånd mellan armstöd	65/75
Totalbredd över armstöd	73/83 cm
Total höjd	79-94 cm
Total längd (från fot till ryggstöd)	80-101 cm
Bredd toalettöppning	Ø 24 cm, 35 cm lång
Sits/rygg/armstöd	Polyuretan
Ram	Krom molybden stål/SAE41-30
Vikt (61 cm/71 cm)	14/15 kg
ISO - klassifikation	ISO 09 33 07 03
Produktens förväntade livslängd	7 år
Riskklass	I
UDI-DI	5 740 000 101 288/5 740 000 101 295
Grundläggande UDI	5740000100003MY
Generella krav och testmetoder	EN 12182
Yttemperaturen på duschstolen kan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla eller värme.	

## 11. Beställning

Modell	Artikelnummer
Duschstol Vastus 61 cm	0142-061-000
Duschstol Vastus 71 cm	0142-071-000





# COBI REHAB

---



## TILLVERKARE

**Cobi Rehab**  
Silovej 16-18  
DK-2690 Karlslunde  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)

## LEVERANTÖR

**Cobi Rehab**  
c/o Helio  
Hornsbruksgatan 23 B  
117 34 Stockholm  
08-702 97 74  
[cobirehab.se](http://cobirehab.se)